


Video-Laryngoskop

mit Einmal-Spatel

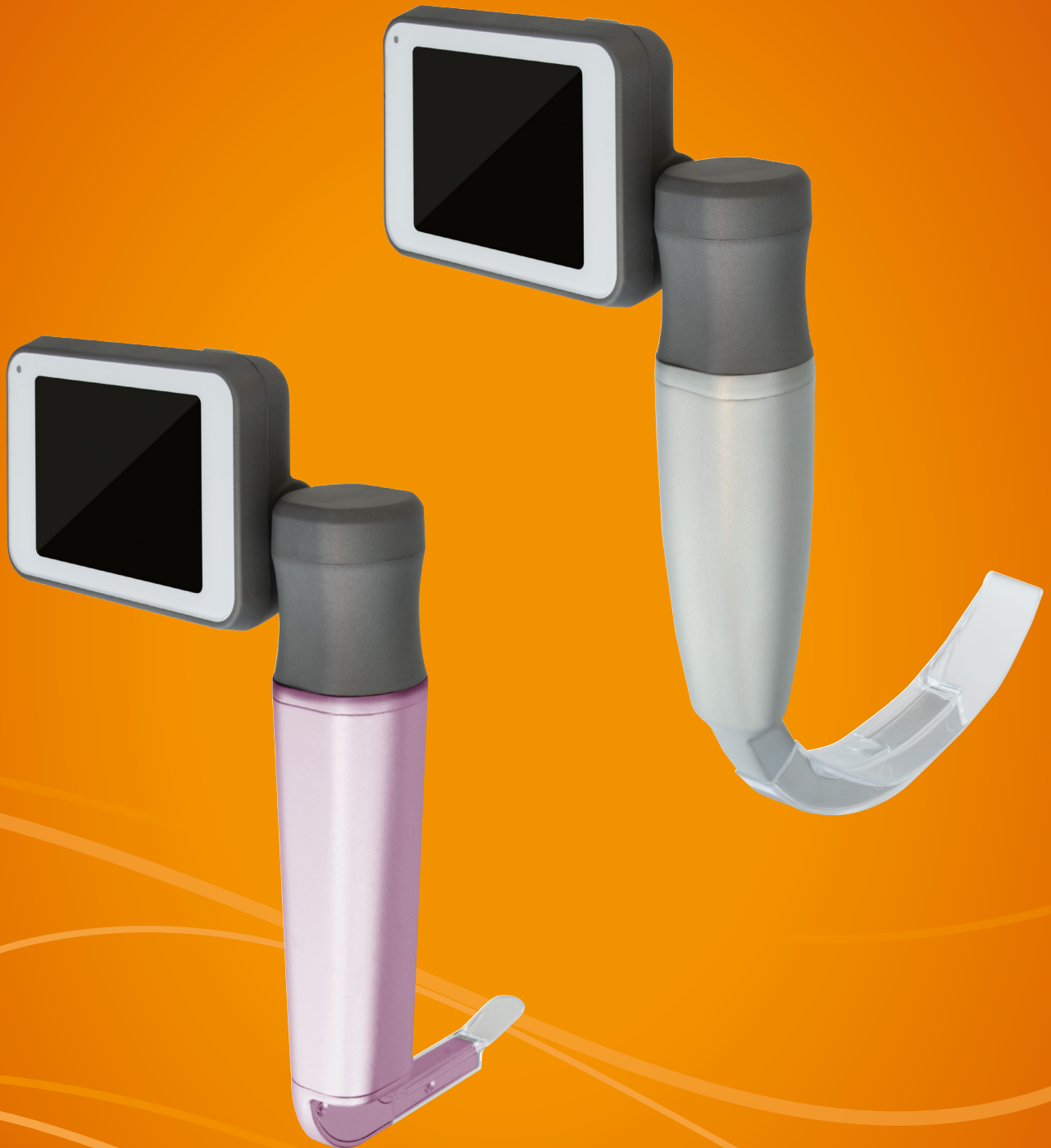

Video-Laryngoskop mit Einmal-Spatel

Video-Laryngoskop-Set

Das Video-Laryngoskop erleichtert die endotracheale Intubation unter anderem bei schwierigen anatomischen Verhältnissen und unterstützt die Sicht auf die Glottis und Stimmbänder. Es wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt und bietet ein wesentliches Plus durch einfache Anwendung sowie Flexibilität durch die beiden Laryngoskopgriffe.

Großzügiger Lieferumfang

- Set im praktischen Aluminiumkoffer verfügbar
- Bestehend aus Bildschirm, Griff für Miller-Spatel, Griff für Macintosh-Spatel, Einmal-Spatel (MIL Gr. 0, MAC Gr. 1, 3, 4), Kontaktschutz, Netzteil, Ladekabel

Einfache Anwendung

- Einstellung von Datum und Uhrzeit zu Dokumentationszwecken
- Leichte Aufnahmemöglichkeit durch Einfingerbedienung
- Schnelles Umschalten zwischen Foto- und Videofunktion möglich
- Ansicht aller Foto- und Videoaufnahmen am PC via USB-Anschluss


Weitere Eigenschaften

- Klare Sicht durch LCD-Farbbildschirm
- Kabelloses Design, kompakte Größe sowie geringes Gewicht
- Einfache Reinigung der wiederverwendbaren Komponenten
- Hygienisch sichere Anwendung durch den Gebrauch von Einmal-Spateln



Einsatzbereiche

- Notfallmedizin
- Anästhesie

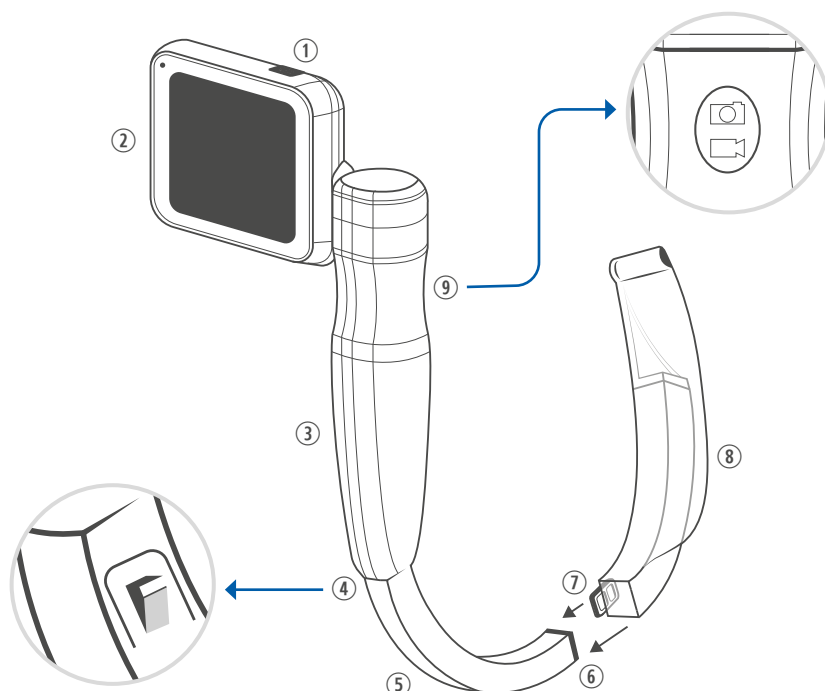

- ① Ein-/Aus-Taste
- ② Bildschirm
- ③ Griff
- ④ Clip
- ⑤ Spatelschiene
- ⑥ Lichtquelle und Kamera
- ⑦ Spatel-Clip
- ⑧ Einmal-Spatel
- ⑨ Foto-/Video-Taste (Rückseite Griff)

Komponenten

Bildschirm | Wiederverwendbar

- Klare Sicht durch drehbaren 3 Zoll LCD-Farbbildschirm mit integrierter microSD-Card
- Akku mit einer Laufzeit von 140 min. und Ausschalt-automatik zum Schutz des Akkus



Drehbar bis 130°

Laryngoskopgriffe | Wiederverwendbar

- Griff für Miller-Spatel, mit besonderer Farbgebung für Neonaten
- Griff für Macintosh-Spatel, für Erwachsene und Kinder
- Mit integrierter Kamera



Miller



Macintosh

Laryngoskopspatel | Einmalgebrauch

Hygienisch sicher | Kein Kontaminationsrisiko | Kein Aufbereitungsaufwand | Mit Antibeschlagbeschichtung

- Einfach aufsetzbar und sicherer Halt durch Clip-Funktion
- Lieferung in klinisch reiner Verpackung, nicht steril

Miller | Gr. 0



Macintosh | Gr. 1, 3, 4



Kontaktschutz am Griff

- Schutz der Kontakte am Griff vor Verunreinigung und möglicher Beschädigung



2 Stück im Lieferumfang enthalten



Ladekabel

- Einfaches Aufladen des Bildschirms, per USB oder mit Netzteil EU
- Betrachtung der Aufnahmen am PC durch USB-Anschluss möglich



Netzteil EU

- Input 100-240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
- Output 5 V DC, 1 A



Technische Daten

| Netzteil EU | |
|-------------------------|------------------------------|
| Input | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,15 A |
| Output | 5 V DC, 1 A |
| Bildschirm | |
| Abmessungen (L x B x H) | ca. 87 x 20 x 62 mm |
| Typ | LCD (Flüssigkristallanzeige) |
| Größe | 3 Zoll |
| Auflösung | 640 x 480 (RGB) |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Ausschaltautomatik | nach 15 min |
| Kamera | |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Seitenverhältnis | 4:3 |

| Speicher | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ | microSD |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Akku | |
| Typ | 3,7 V Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | 140 Minuten |
| Aufladezeit | bis zu 5 Stunden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Lagerung und Transport | Temperaturbereich: -20 °C bis 40 °C |
| | Rel. Luftfeuchtigkeit: 10 % - 90 %, nicht kondensierend |
| | Atmosphärischer Druck: 500 hPa - 1060 hPa |
| Betrieb | Temperaturbereich: 10 °C bis 40 °C |
| | Rel. Luftfeuchtigkeit: 10 % - 90 %, nicht kondensierend |
| | Atmosphärischer Druck: 500 hPa - 1060 hPa |

Lieferprogramm - Video-Laryngoskop

Video-Laryngoskop-Set

| Best.-Nr. | Beschreibung |
|-----------------|--------------------------------------------|
| HLK07-VL1-SET01 | Video-Laryngoskop-Set, bestehend aus ① - ⑪ |

Zubehör und Ersatzteile

| Best.-Nr. | Beschreibung | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| HLK07-VL1-K | Aluminiumkoffer für Video-Laryngoskop-Set | ① |
| HLK07-VL1 | 3" LCD-Bildschirm für Video-Laryngoskop | ② |
| HLK07-VL1-GMC | Video-Laryngoskopgriff, Typ Macintosh | ③ |
| HLK07-VL1-GML | Video-Laryngoskopgriff, Typ Miller | ④ |
| HLK07-VL1-SMC1 | Einmal-Laryngoskopspatel für Video-Laryngoskop, Typ Macintosh, Größe 1, Kinder | ⑤ |
| HLK07-VL1-SMC3 | Einmal-Laryngoskopspatel für Video-Laryngoskop, Typ Macintosh, Größe 3, Erwachsene | ⑥ |
| HLK07-VL1-SMC4 | Einmal-Laryngoskopspatel für Video-Laryngoskop, Typ Macintosh, Größe 4, großwüchsige Erwachsene | ⑦ |
| HLK07-VL1-SML0 | Einmal-Laryngoskopspatel für Video-Laryngoskop, Miller, Größe 0, Neonaten | ⑧ |
| HLK07-VL1-G-KS | Kontaktschutz für Video-Laryngoskopgriff | ⑨ |
| HLK07-VL1-NTEU | Netzteil EU für Video-Laryngoskop | ⑩ |
| HLK07-VL1-LDK | Ladekabel/USB-Kabel für Video-Laryngoskop | ⑪ |



HUM

HUM Gesellschaft für Homecare
und Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | D-44536 Lünen
FON +49 (0)231 880885-0 | FAX +49 (0)231 880885-58
E-Mail: sales@hum-online.de | <https://www.hum-online.de>



PP-VIDEO-LARYNGOSKOP_DE



ID 4551345 Rev. 2.0 / 25.03.2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
© HUM Gesellschaft für Homecare und Medizintechnik mbH